


Přehled sortimentu



Pečovatelství

Přehled sortimentu

Pečovatelská lůžka, asistenční systémy

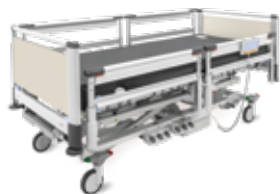

Essenza 300, 300LT



Sentida sc, xl, xxl



SafeSense



Air2Care 8
(aktivní)



Carisma sc



Senitida 6 xs, s



SafeSense 3



Air2Care 6
(aktivní)



Movita sc



Sentida 7i



Air2Care 5
(aktivní)



Air2Care 4



Air2Care 20
(aktivní)

Matrace

Stolky, jídelní desky

Křesla, židle, stoly, nábytek



Air2Care 10
(aktivní)



ViskoMatt 10
(pasivní)




Combinea



Sella



Blues Comfort

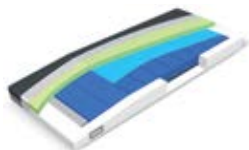

CliniCare 100HF
(hybridní)



MediMatt 30
(pasivní)



Combinea plus



Softlin Plus



Impuls



ViskoMatt 50
(pasivní)



PrimaCare 10
(pasivní)



vt3-t



Softlin Komfort



Medlin



ViskoMatt 30
(pasivní)



EffectaCare 20
(pasivní)



vitalia 3



Gavota



Forlin



ViskoMatt 30B/10B
(pasivní)



EffectaCare 10
(pasivní)



Solido 3



Blues

Essenza

Turn to the Essence of Care

Starat se o klienty s nasazením a obětavostí je podstatou práce ošetřovatelek. Vzhledem ke stárnutí populace a nárůstu počtu chronicky nemocných obyvatel je zdravotnicko ošetřovatelského personálu velký nedostatek a jeho počet ubývá např. v důsledku muskuloskeletálních poruch (MSD), souvisejících s jeho náročnou prací. Rádi bychom navrátili ošetřovatelkám jejich čas, bezpečí a nadšení.

LŮŽKA S LATERÁLNÍM NÁKLONEM



Nejnižší poloha lůžka
25,5 cm



Bezpečná mobilizace
ve výšce křesla 40 cm



Optimální ošetřovatelská
poloha 78 cm





ESSENZA 300

Univerzální nízké lůžko s výjimečným bezpečným pracovním zatížením až 300 kg.

ESSENZA 300 LT

Lůžko s laterálním náklonem, který patří neodmyslitelně k rutinní ošetrovatelské činnosti.



Laterální náklon zaručuje především optimální ergonomii a efektivní mobilizaci.



Madlo Mobi-Lift® poskytuje oporu při opuštění lůžka.



EasyDrive® umožňuje transport klienta jedním ošetrovatelem.



SoftBrake je jedinečná konstrukce kolečka, která zajišťuje dokonalé ovládání brzd s nízkou fyzickou zátěží.



Lůžko s ergonomickým rámem Ergoframe® snižuje nejvyšší tlak v pánevní oblasti až o 16%.



Nízká výška 25,5 cm pomáhá zmírňovat závažnost pádů klientů.


Včasná mobilizace klienta



Bezpečná péče o klienta



Snazší přesun klienta

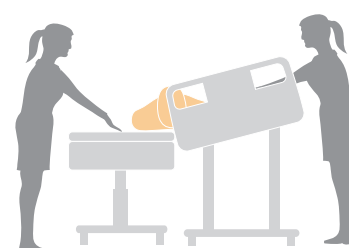

Sentida sc

Většina seniorů si přeje, aby mohla trávit svá pozdní léta v důvěrně známém prostředí. Současně se mění vnímání starších lidí ve společnosti. Pro mnoho seniorů dnes již odchod do důchodu neznamená nečinnost, ale je to životní etapa, kdy se věnují různým zájmům a chtějí žít plnohodnotný a aktivní život. Hledají se nové koncepty kvalitního života ve vyšším věku. Patří mezi ně například touha po vhodném bydlení, které nabízí domácí atmosféru, osobitost, bezpečí, pohodlí a flexibilitu. Společnost LINET si je těchto požadavků a změn vědoma. Díky nové lůžkové platformě Sentida sc a koncepcím na míru může na rozličné požadavky reagovat ještě pružněji, efektivněji a s ohledem na konkrétní potřeby.



Domácí – brzda na nápravě




Extramobilní – centrální brzda

- Lůžko Sentida sc je k dispozici ve dvou modelových variantách – domácí nebo extramobilní či variantě standard, xl a xxl.
- Manipulace s ním je snadná – zejména v extramobilní variantě s většími kolečky pro ještě větší komfort při jízdě. To znamená, že i těžce postižení a imobilní klienti se mohou během pobytu na pečovatelském lůžku zapojit do života u sebe doma nebo v pečovatelském zařízení.

Nízká poloha 23 cm

Bezpečný spánek bez omezení osobních potřeb.

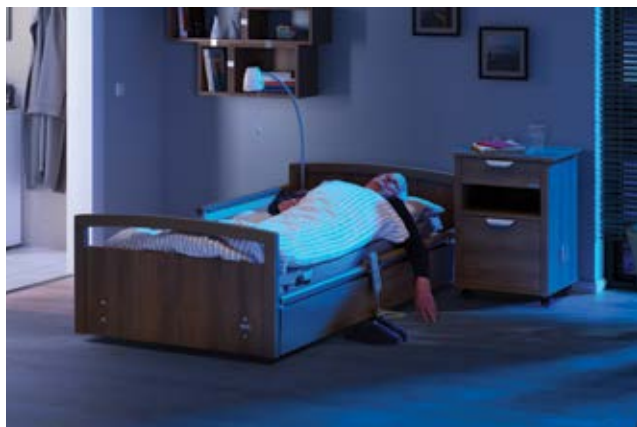

SafeFree® fix a flex

Přizpůsobeno vašim požadavkům

4 dělené boční lišty v kombinaci se širokou škálou postranic SafeFree® chrání osoby ohrožené pádem.



Bez ochrany



3/4 ochrana



Mírná ochrana



Plná ochrana

Automatické polohy

Rychlé, snadné a ergonomické díky režimu jednoho tlačítka.



Sledování televize nebo čtení na lůžku s automatickým komfortním sezením.



Prevence vzniku dekubitů a odlehčení pat prostřednictvím automatické profylaxe.

Automatické komfortní sezení a profylaktická poloha

- Podporují zdraví zejména imobilních klientů.
- Zvyšují kvalitu života klientů na lůžku.

Dvojitá autoregrese ložné plochy

Bezpečná a pohodlná mobilizace na lůžku.



Dvojitá autoregrese

- Optimalizuje opěrnou plochu v oblasti sedací části zvětšením plochy zádového dílu a opěrky stehen.
- Snižuje tlak na citlivé části těla, jako jsou hýždě a kostrč.
- Uspadňuje dýchání tím, že v uvolněné poloze vsedě poskytuje více prostoru v oblasti hrudníku a břicha.
- V kombinaci se zádovým dílem o délce téměř 90 cm umožňuje preventivní a pohodlné polohování imobilních osob.

Dvojitá autoregrese = o 17 cm víc prostoru na lůžku!

Carisma sc

Nízké pečovatelské lůžko Carisma sc je řešením pro pečovatelské domy, které usilují o komfort a funkčnost. Toto inovativní pečovatelské lůžko bylo vyvinuto tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám pečovatелů i klientů. Díky jedinečným prvkům, jako jsou postranice SafeFree®, které mohou sloužit jako mobilizační pomůcka, a účinným konceptům aktivní prevence pádů nabízí Carisma sc jedinečnou kombinaci bezpečnosti, nezávislosti a komfortu.



Nejdůležitější funkce lůžka Carisma sc

Doplňková LED lampička zvyšuje komfort například při čtení.



1 | Bezpečná výška spánku
25 cm minimalizuje riziko vážných úrazů v důsledku pádů.



2 | Technologie ergonomického rámu Ergoframe®
(s dvojitou autoregresí) zvětšuje prostor v oblasti pánve o 16 cm.



4 | Postranice SafeFree®
Podporují mobilizaci a zajišťují individuální prevenci pádů bez omezení.



5 | Madlo MobiStick 2
Pro výstup z lůžka poskytuje individuální a pokročilou prevenci pádů.



3 | Nový ovladač nabízí automatické pečovatelské polohy, které lze elektronicky uzamknout a odemknout. Ovladač dotváří jednoduchý design a podsvícení.

Klientské funkce

Nastavení zádového dílu

Autokontura

Nastavení výšky

Pečovatelské funkce

Automatická Fowlerova poloha

Nulová pozice KPR

Automatické kardiacké křeslo

Automatická Trendelenburgova poloha

Všechny čtyři pečovatelské funkce lze nastavit stisknutím jediného tlačítka.

Movita sc

Nízké pečovatelské lůžko Movita sc je nejen základem pro všechny požadavky v ošetrovatelské péči, ale představuje také alternativní, ekonomicky efektivní řešení v rámci řady pečovatelských lůžek LINET. Toto univerzální pečovatelské lůžko nabízí širokou škálu funkcí a možností vybavení, které potěší nejen ošetrovatele, ale také klienty. Zjistěte, jak vám toto pečovatelské lůžko pomůže dosáhnout optimálního poměru cena/výkon, aniž by došlo ke snížení komfortu a bezpečnosti.



Nejdůležitější funkce lůžka Movita sc

- Komfort pro péči
- Účinná prevence pádů
- Ergoframe®
- Bezpečnost produktu

Doplňková LED lampička zvyšuje komfort například při čtení.



1 | Bezpečná výška spánku
25 cm minimalizuje riziko vážných následků pádů.



2 | Technologie ergonomického rámu Ergoframe®
(s dvojitou autoregresí) zvětšuje prostor v oblasti pánve o 16 cm.



4 | Důmyslná bezpečnostní koncepce minimalizuje riziko zranění a chrání lůžko před poškozením.



5 | Madlo MobiStick 2 poskytuje individuální a pokročilou prevenci pádů.



3 | Nový ovladač nabízí automatické pečovatelské polohy, které lze elektronicky uzamknout a odemknout. Ovladač dotváří jednoduchý design a podsvícení.

Klientské funkce

- Nastavení zádového dílu
- Autokontura
- Nastavení výšky

Pečovatelské funkce




- Automatická Fowlerova poloha
- Nulová pozice KPR
- Automatické kardiacké křeslo
- Automatická Trendelenburgova poloha

Všechny čtyři automatické pečovatelské funkce lze nastavit stisknutím jediného tlačítka.

SafeSense®

Klienti odkázaní na pečovatelské lůžko jsou vystaveni mnoha rizikům. Vedle rizik spojených s jejich aktuálním stavem jim hrozí také pád z lůžka nebo vznik proleženin, způsobených lokálním působením tlaku na tkáň. Ošetrovatelský personál je přitom vystaven stále většímu stresu vyvolanému náročností jeho práce. Inteligentní technologie mohou napomáhat k řešení těchto problémů, proto vyzkoušejte naše asistenční systémy SafeSense či SafeSense 3.



SafeSense®	Sensor opuštění lůžka		Digitální platforma SafeSense 3
	Světlo	Světlo & alarm	
			
Automatické osvětlení pod lůžkem	✓	✓	✓
Signalizace opuštění lůžka		✓	✓
SafeSense® CareMonitor aplikace			✓
Sledování pohybu – monitoring			✓
Opuštění lůžka – monitoring			✓
Přehled obsazení lůžek			✓

NOVINKA

Kompatibilita s lůžky	SS 1/2	S3
	Essenza 300, 300LT	✗
Sentida sc	integrovaná verze	integrovaná verze
Sentida sc, xl, xxl	✗	✗
Sentida 6s, xs	✗	✗
Sentida 7i	✗	✗
Movita sc	samostatné řešení	samostatné řešení
Carisma sc	samostatné řešení	samostatné řešení

Hybridní matrace

CLINICARE® 100 HF

Hybridní matrace je kombinací aktivního (vzduchového) systému a pasivní (pěnové) matrace, přináší tak pro oblast pečovatelsví mnoho benefitů.



Aktivní systém

Pokud stav pacienta vyžaduje aktivní terapii, matrace je vybavena kompresorem, umožňujícím alternující terapii pomocí střídavého nafukování a vyfukování systému 2 cel k optimální distribuci tlaku a prevenci dekubitů.

Pasivní systém

Matrace CliniCare® 100 HF umožňuje optimální rozložení tlaku i v pasivním režimu.

Pasivní matrace

Řada pasivních matrací LINET® je navržena tak, aby optimalizovala rozložení tlaku podle polohy a pohybů pacienta.

ViskoMatt 50

Vynikající odlehčení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace s horní antimikrobiální viskoelastickou pěnou a spodní vrstvou ze studené pěny.



svařované švy



190kg



svařované švy



165 kg

ViskoMatt 30B

Matrace vhodná pro bariatrické pacienty. Vynikající odlehčení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace v kombinaci 3 vrstev: viskoelastické polyurethanové pěny, studené pěny a polyetherové pěny.



šité švy



285 kg



svařované švy



150 kg

ViskoMatt 10

Základní model pro prevenci dekubitů s dobrou redistribucí tlaku. Viskoelastická horní část a polyetherová nosná vrstva.

ViskoMatt 10B

Matrace vhodná pro bariatrické pacienty. Vynikající odlehčení tlaku. Vysoce elastická a odolná matrace v kombinaci 3 vrstev: viskoelastické polyurethanové pěny a 2 vrstev polyetherové pěny.



šité švy



235 kg



šité švy



150 kg

MediMatt 30

Dvouvrstvá matrace s vysoce elastickou pěnou pro vysoký komfort. Horní vrstva je tvořena polyetherovou studenou pěnou a spodní, podpurná část standardní polyetherovou pěnou.

PrimaCare 10

Jednovrstvá matrace s příčným a podélným profilováním v horní části. Plně prořezaná pro ještě lepší konturování.



šité švy



200 kg



šité švy



150 kg

EffectaCare 20

Monobloková pěnová matrace. Jádru má příčnou profilaci v sakrální oblasti. Spodní prořezání matrace usnadňuje její polohování.

EffectaCare 10

Monobloková pěnová matrace s vlnovou profilací na obou stranách, díky čemuž lze pěnu obrátit uvnitř potahu.



šité švy



110 kg



oboustranná



Evakuační potah PRO

Nejlepší řízení rizik: Jednoduchá a rychlá evakuace v kombinaci s nejvyššími hygienickými standardy. Široké přezky pro optimální nastavení pásu, 2 optimálně umístěné popruhy pro fixaci pacienta.

Aktivní systémy

Aktivní matrace Air2Care s alternujícím systémem 2 cel poskytuje efektivní podporu prevence dekubitů.* Pracuje na principu alternace střídání tlaku ve 2 sousedících celách a tím nabízí zmírnění rizikového zatížení. Výběr různých cyklů alternace umožňuje personálu zvolit správnou rovnováhu mezi efektivní prevencí dekubitů a komfortem ležícího klienta. Matrace Air2Care 5,6,8 se snadno obsluhují a nabízejí funkci Easy Smart pro automatické nastavení tlaku.

Lokalizované odstranění tlaku

Samouzavírací ventily, kterými je vybavena každá cela, umožňují individuální odstranění tlaku, například v rizikových zónách nebo v místech s existujícími dekubity.

POZNÁMKA: Vždy je potřeba provést kontrolu a ověřit, zda se matrace kvůli vypuštění některé z cel nedeformuje.




2 cely

Alternace: Střídání tlaku

Alternující systém se 2 celami

Díky aktivnímu systému se dvěma celami je možné střídat tlak v sousedních celách. V jedné cele se tlak sníží, a tím se minimalizuje tlakové zatížení, vedlejší cela je nafouknutá a poskytuje oporu. Ve zvoleném cyklu se pak tento proces průběžně opakuje.

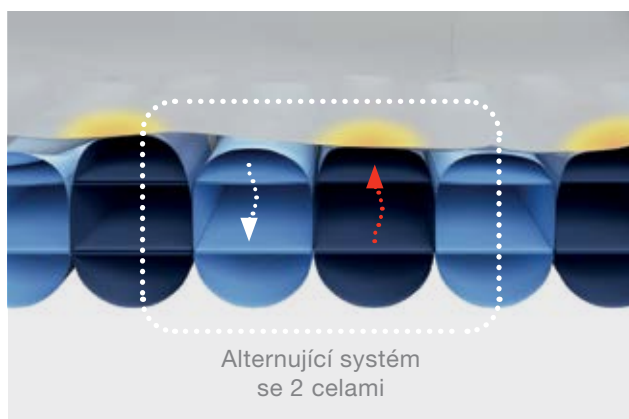


4 cykly

Možnost nastavení délky cyklu

10/15/20/25 minut

Nastavení čtyř různě dlouhých cyklů alternace umožňuje zvolit nejlepší variantu vhodnou a odpovídající zdravotnímu stavu klienta nebo jeho potřebám a aktuální situaci, například během spánku či odpočinku.

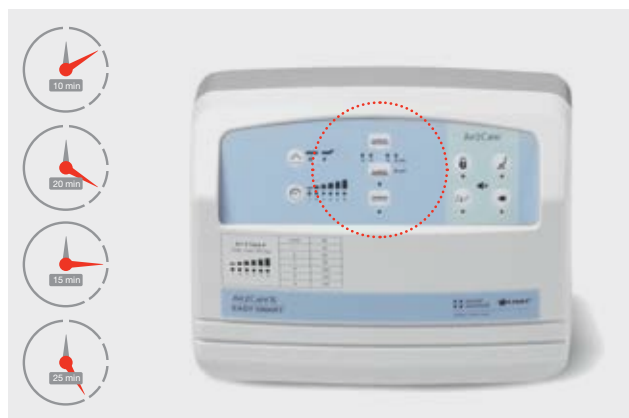

Air2Care 8

Alternující matrace je vhodná pro klienty s vyšší váhou, hodnota bezpečného zatížení matrace je až 250 kg.



SWL [kg]	180 / 250*	
Rozměry	Externí matrace [cm]	200 × 86 × 20 200 × 100 × 20 200 × 120 × 20 200 × 140 × 20 210 × 86 × 20
	Inegrovaná matrace [cm]	200 × 86 × 20
Režimy	Alternující, maximální, konstantní nízký tlak	
Délka cyklu*	10, 15, 20, 25 min.	
Vrstva	Air+Air	
Režim transport	Ano	
Funkce uvedení do Fowlerovy polohy	Single point	

* Vztahuje se pouze k externí matraci.

Air2Care 6

Aktivní matrace je k dispozici v různých rozměrech pro použití v širokém spektru sociálních služeb.



SWL [kg]	160	
Rozměry	Externí matrace [cm]	200 × 86 × 15 200 × 90 × 15 210 × 86 × 15 210 × 90 × 15 220 × 86 × 15
	Inegrovaná matrace [cm]	200 × 86 × 15
Režimy	Alternující, maximální, konstantní nízký tlak	
Délka cyklu	10, 15, 20, 25 min.	
Vrstva	Air + Air	
Režim transport	Ano	
Funkce uvedení do Fowlerovy polohy	Single point	

Air2Care 5

Alternující vrstva určená pro použití v kombinaci s vysoce kvalitní pasivní matrací.



SWL [kg]	140
Rozměry [cm]	200 × 86 × 12,5
Režimy	Alternující, maximální, konstantní nízký tlak
Délka cyklu	10, 15, 20, 25 min.
Vrstva	Overlay
Režim transport	Ano
Funkce uvedení do Fowlerovy polohy	Single point

Air2Care 4

Aktivní polštář podporuje účinnou ochranu proti dekubitům i při vysazování klientů do křesla.



Air2Care 20

2celový alternující systém s digitálním kompresorem poskytuje podporu pro prevenci dekubitů až při středním riziku jejich vzniku.



Air2Care 10

2celová alternující matrace s analogovým kompresorem podporuje prevenci dekubitů u rizikových klientů.



Stolky

Stolky v blízkosti lůžek sehrávají důležitou roli v mobilizaci klienta a ovlivňují kvalitu jeho pobytu v zařízení. Stolky a jídelní desky navrhujeme s ohledem na maximální praktičnost, bezpečí a podporu samostatnosti klienta u řady úkonů.



COMBINEA / COMBINEA PLUS

Modulární řada Combinea nabízí až 8 různých sestav stolků, 5. kolečko u dolní zásuvky zajišťuje stabilitu a chrání stolek proti překlopení.



vt 3-t

Model vt 3-t přesvědčí osvědčenými detaily. Robustní ocelová konstrukce, vysoce kvalitní ABS hrany všech součástí stolku a zaoblená horní část dodávají nočnímu stolku nezaměnitelný charakter. Jídelní desku lze používat z obou stran.



KOMFORTNÍ PŘÍSTUP K OSOBNÍM VĚCEM



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

VITALIA 3

Stolek Vitalia 3 zaujme dekorativními detaily, jako je zaoblená horní deska či ergonomicky tvarované hliníkové rukojeti. Páté kolečko stolku navíc zajišťuje dodatečnou stabilitu a odolnost proti naklonění. Jídelní desku lze použít z obou stran.



VIVO 2-T

Vivo 2-t má 2 zásuvky, výsuvnou přihrádku a niku, nabízí tak dostatek úložného prostoru. Jídelní desku lze používat z obou stran.

STOLEK S JÍDELNÍ DESKOU

Laminová úprava zaručuje snadné čištění a dlouhou životnost produktu. Součástí stolku jsou 3 držáky na lahve, zabudované ve skříňce. Stolek lze dodat s či bez jídelní desky, jejíž výškový zdvih je plynulý.



SOLIDO 3

Jídelní stolek lze použít z obou stran lůžka nebo křesla, a to v horizontální poloze při jídle či náklonu ke čtení a psaní. Výškové nastavení desky bez nutnosti použití madla.

Sedací nábytek

SELLA

Multifunkční křeslo Sella svou kombinací potřebných funkcí, ergonomicky vhodně zvolených proporcí a přívětivým designem přináší řadu výhod a ulehčení jak pro imobilní osobu, tak i pro obsluhující personál. Unikátní patentovaná kombinace funkcí umožňuje mobilizaci imobilní osoby zcela bez fyzické námahy. Díky hydraulickému zdvihu a naklonění celého křesla včetně sedáku a nastavení područek pro vzepření rukou je vystupování klienta z křesla opravdu velmi jednoduché.



SOFTLIN KOMFORT

Křeslo Softlin Komfort představuje optimální řešení sedacího nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určeno jak pro domácí péči, tak i do domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Díky široké modularitě je možné najít takovou variantu křesla Softlin Komfort, která nejvíce vyhoví Vaším konkrétním potřebám. Navíc můžete vybírat z velkého množství příslušenství.

- Pevné křeslo
- Pevné křeslo s polohovatelným opěradlem
- Pevné křeslo s polohovatelným opěradlem a lýtkovou podpěrou
- Mobilní křeslo se 4 dvojitými kolečky s brzdou, centrálním kolečkem pro snadnou jízdu a výklopným dílem pro podpěru chodidel



GAVOTA

Křeslo GAVOTA je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje život osobám se sníženou pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití v domovech důchodců, v domovech s pečovatelskou službou nebo v denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči.

- Pevné křeslo
- Mobilní křeslo s průměrem koleček 75, 125 a 300 mm
- Mobilní křeslo s elektrickým motorem
- Křeslo s pevnou i výškově nastavitelnou područkou
- Křeslo Plus určené vyšším osobám





SAMOSTATNOST A NEZÁVISLOST KLIENTA



SNÍŽENÍ FYZICKÉ NÁMAHY OŠETŘOVATELSKÉHO PERSONÁLU

SOFTLIN PLUS

Židle Softlin představuje velice pohodlné řešení sedacího nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Robustní dřevěná konstrukce zajistí zvýšenou pevnost a stabilitu, tvarované opěradlo lze dodat ve třech různých výškách, zvýšený sedák a područky (nastavitelné do dvou různých poloh) umožňují snadnější sedání a vstávání. Softlin lze dodat také ve variantě dvojžidle a lze ho vybavit celou řadou příslušenství.



IMPULS

Židle IMPULS kombinuje štíhlé dřevěné linie s originálními chromovými detaily. Díky svému přizpůsobivému vzhledu a velké paletě odstínů má univerzální využití. Židli IMPULS si navíc můžete vybrat ve variantě dvojžidle, trojžidle, s odnímatelným potahem a s chromovými prvky.



Sedací nábytek

BLUES

Jednomístné elegantní rozkládací křeslo pevné konstrukce s kvalitním čalouněním a atraktivním designem slouží nejen k pohodlnému sezení, ale také jako přistýlka v zařízeních, jako jsou domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, hospice, stacionáře.

Jednoduchý mechanismus kovové konstrukce zajistí stabilitu při ležení. Po rozložení lze hlavovou část nastavit do dvou poloh.

Kolečka v zadní části usnadní manipulaci s křeslem.



BLUES COMFORT

Pohodlné křeslo pomáhá lidem sdílet vzájemnou blízkost a být se starším nebo nemocným člověkem přes noc u jeho lůžka. Jednoduchý mechanismus kovové konstrukce zaručuje vysokou stabilitu v případě rozložení. Křeslo umožňuje tři relaxační polohy – polohu vsedě, polohu relaxační, s vytaženou podnožkou, a polohu pro spaní. Kolečka na spodní části křesla jsou vpředu otočná o průměru 75 mm s brzdou. Vzádu jsou pevná kola o průměru 40 mm.



Nábytek

MEDLIN

Nábytek Medlin a Medlin Plus je určen pro sesterny, vyšetřovny, inspekční pokoje či laboratoře. Vývoj a konstrukce modulárního systému Medlin jsou podřízeny požadavkům personálu, což se odráží v použitých materiálech, konstrukčních prvcích i v řešení úložných prostor.



FORLIN

Nábytek Forlin se vyznačuje vysokou variabilitou, nabízí řadu různých sestav a kombinací dle potřeb a prostorových dispozic.



LINET® Akademie

Získejte praktické dovednosti a klinické informace. Naučte se změnit rutinní praktiky a používat moderní technologie. Natrénujte správnou manipulaci s klienty. Osvojte si základní postupy správné ergonomické péče. Pečujte o vlastní zdraví s podporou elektricky polohovatelných lůžek.



Produktové školení

Naučte se 100% využívat moderní technologie

- Detailní zaškolení zdravotnického personálu zkušeným klinickým koučem LINET přímo na Vašem pracovišti ve skupině max. 10 osob
- Základní principy ergonomicky správné péče, nácvik polohování
- Využití klinických poloh lůžka při prevenci dekubitů

Workshop Moving & Handling





Práce sestry nemusí bolet

- Efektivní využití funkcí polohovatelného lůžka pro ergonomickou manipulaci s pacientem
- Prevence zranění a úrazů zdravotnických pracovníků, odlehčení nejvíce namáhavých partií
- Praktický nácvik každodenních činností – polohování, stlaní lůžka, převlékání a hygiena pacienta

Servis LINET®

Vyberte si z řady možností

Naše servisní smlouvy nabízejí různé stupně pravidelné údržby a kvalitního servisu podle potřeb Vašeho zařízení. Ručíme za 100% ochranu Vašich lůžek a matrací.


Typ smlouvy	Preventivní prohlídka	Opravy	Náhradní díly
 3hvězdičková smlouva – PREVENCE Tato smlouva garantuje nezbytné minimum pro bezpečnost a dobrý stav výrobku. Zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu a kontrolu – vizuální, funkční a elektrickou s doporučením výměny opotřebovaných dílů.	✓		
 4hvězdičková smlouva – POKROČILÁ 4hvězdičková smlouva garantuje pravidelnou preventivní údržbu, kontrolu a opravy zjištěných závad našimi technikami.	✓	✓	
 5hvězdičková smlouva – PLNÝ SERVIS Tato smlouva zahrnuje pravidelnou preventivní údržbu výrobků, veškeré opravy a potřebné náhradní díly.	✓	✓	✓
 Smlouva o prodloužené záruce Smlouva kombinuje nabídku oprav včetně spotřeby náhradních dílů zdarma na předem stanovenou dobu. Jedná se tedy o prodloužení záručních podmínek po uplynutí standardní záruční doby.		✓	✓

- Komplexní řešení od jednoho dodavatele
- Prodloužení životnosti produktů a maximální bezpečí pro pacienty
- Kontrola nad financemi
- Rozsah služeb dle vašich potřeb
- Originální náhradní díly za výhodnou cenu
- Servis nejvyšší kvality od zkušených techniků



Řešení lůžek stolků a nábytku

DEKORY: CARISMA SC, SENTIDA, ESSENZA*, VITALIA 3, VT 3-T, VIVO 2-T



NEW: Crystal White
(U11026)



NEW: Magnolia
(U11509)



NEW: Norway Maple
(R27044)



Lindberg Oak (R20021)



NEW: Nordic Teak
(R50094)



NEW: Italian Oak
(R20286)



NEW: Salisbury Elm
Natural (R37016)



Havanna Cherry
(R42006)



NEW: Altmuehl Beech
(R24006)



Beech Tinted
(R24034)




NEW: Okapi Walnut
(R30135)



Sand Greige
(U16001)
Tento dekor je dostupný pouze
pro lůžko CARISMA.

* Tyto dekory je možné objednat jako atypická řešení s delšími dodacími termíny.

DEKORY: MOVITA SC

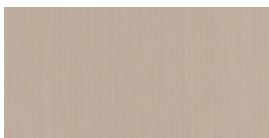

Sand Greige
(U16001)



Lindberg Oak
(R20021)



Altmuehl beech
(R24006)

DEKORY: SOFTLIN PLUS, SOFTLIN COMFORT, GAVOTA, BLUES, BLUES COMFORT, IMPULS



Arctic



Nature



Catano



Alder



Cherry



Cognac



Largo



Tobacco



Walnut



Mahogany




Brown




Black



Chili 60116

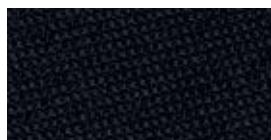


Chili 60999

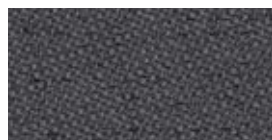

Chili 61171



Chili 61172

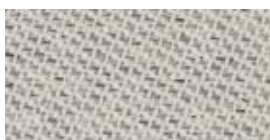

Chili 61174



Chili 63090



Chili 64202



Chili 65111



Chili 66171



Chili 66176



Chili 68190



Chili 68196

Řešení lůžek



Valencia C5
Apfel 238-5041



Valencia C5
Berry 238-2002




Valencia C5
Delft 238-3067



Valencia C5
Kirsche 238-2074



Valencia C5
Orange 238-6019

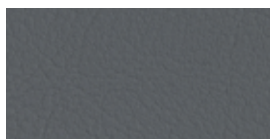

Valencia C5
Perle 238-4045




Valencia C5
Pink 238-2021




Valencia C5
Safran 238-6012



Valencia C5
Schwarz 238-9035

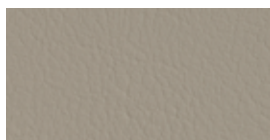

Valencia C5
Sisal 238-1048

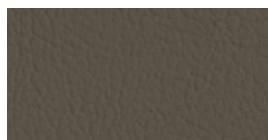

Valencia C5
Taupe 238-0034



Valencia C5
Turkis 238-5057


DEKORY: SELLA



Corn Yellow



Orange

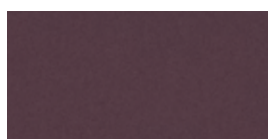


Violet



Ocean Green



Brilliant Blue

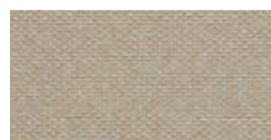

Creamy




Apricot



Blue

DEKORY: ESSENZA, COMBINEA PLUS, SOLIDO 3



White (030)



Pearl white (Co17)



Aquamarine (A014)



Rose givre (R058)



Oslo blue (B048)



Fleur d'anis (F053)



Light grey (G044)



Tangerine (T106)



Maple white (E009)



Beech provence (H027)



Merisier ambre (M091)



Zebra moka (Z002)

DEKORY: COMBINEA



W980



U113



U708



U522



U332



U630



H1733



H1582

Řešení lůžek

ČELA

Hlavová čela



Design A



Design C



Design Df



Design G



Design O



Design Ts

Nožní čela



Design Ak



Design C



Design Df



Design G



Design O



Design Ts

Nízká nožní čela



Design Ak



Design Cx



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Ox



Design Tsx

POSTRANICE



SafeFree Flex 0



SafeFree Flex 2



SafeFree Flex 3




SafeFree Flex 4

LOŽNÁ PLOCHA


Můžete volit ze 3 variant ložných ploch

- Ložná plocha z drátěných sítí Aero (01) zajišťuje dobré provětrávání.
- Plastové vrstvy ložné plochy Easyclean (02) se velmi snadno čistí.
- Komfortní ložná plocha (03) s vynikajícími vlastnostmi měkkého polohování (a) podporuje prevenci dekubitů. Silněji odpružené prvky okrajové zóny slouží k jistější orientaci během spánku a usnadňují opouštění lůžka.

U všech variant lze segmenty ložné plochy snadno vyjmout a vyčistit (b).

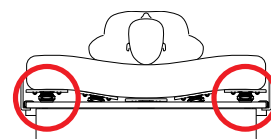

a)

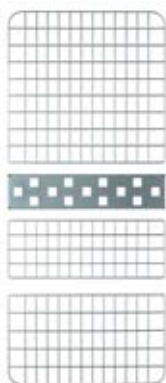


01



02



03

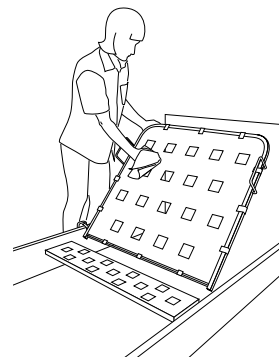

b)

Řešení lůžek

KOLEČKA



Tente Dekora

Plastové kolečko 100 mm, bílý hliník,
(zdvih lůžka 27–82 cm)



Tente Linea

Plastové kolečko 125 mm,
(zdvih lůžka 29,5–82,5 cm)



Tente Design

Plastové kolečko 125/150 mm,
(zdvih lůžka 29,5/32–82,5/85 cm)



Jednoduchý brzdící systém

Kolečko 100 mm
(nastavení 36–78 cm)


AUTOREGRESE

Společnost LINET se již mnoho let zasazuje o snížení rizika vzniku dekubitů: dvojitou autoregresí ložné plochy s rámem BiNetic. Při polohování zádového dílu se tento díl nejen ohne jako závěsný kloub, ale dojde také k jeho odsunutí od středu. To znamená, že části lůžka se během polohování pohybují od sebe (viz obr. 2b), což zvětšuje ložnou plochu v pánevní oblasti a významně snižuje tlak v ohrožené sakrální části zad.


V případě dvojitě autoregrese se pohybuje nejen zádový díl, ale také stehenní díl ložné plochy, což dále zvětšuje prostor pro sezení.

Výsledky získané měřením tlaku jasně dokazují, že jednoduchá autoregrese snižuje úroveň tlaku ve srovnání se standardní polohou lůžka. Při dvojitě autoregresi (obr. 3b) je pak tlak ještě nižší.


Obr. 1

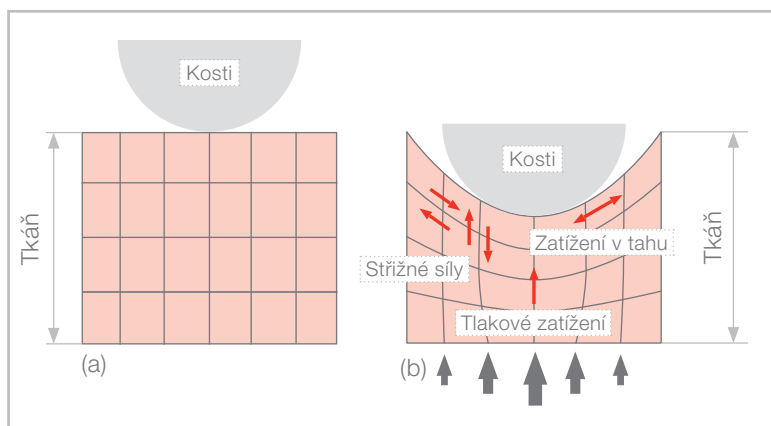

Obr. 2

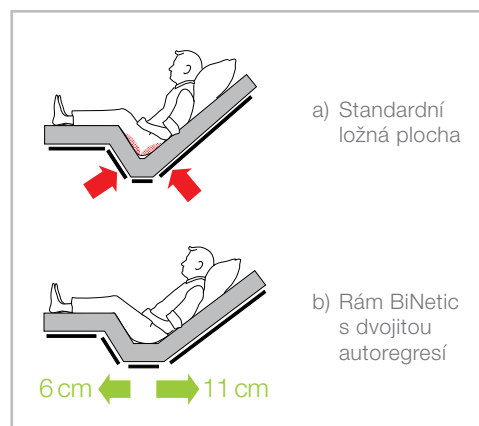

Obr. 3

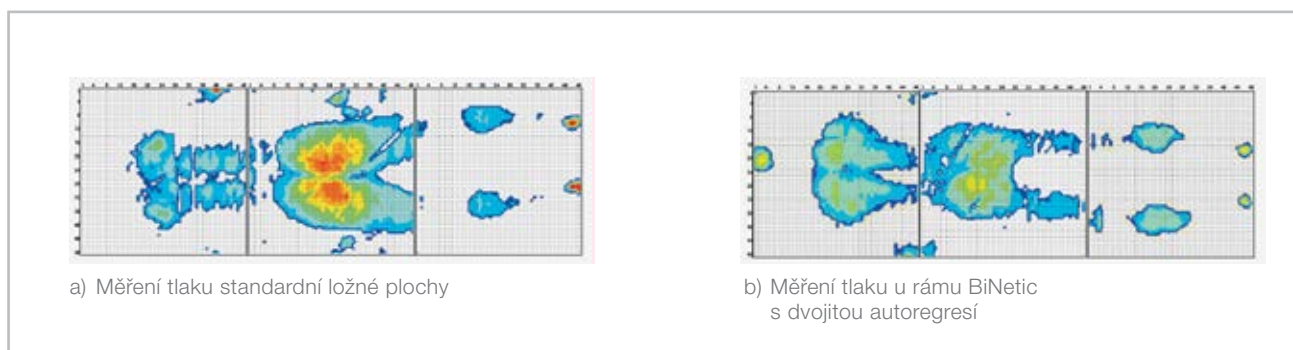

Dvojitá autoregrese samozřejmě není jediným způsobem profylaxe dekubitů. Může však účinně podpořit probíhající terapii a ukazuje, že bychom měli využít všechny technické možnosti, které máme k dispozici ke zlepšení ošetrovatelské péče.

Technické specifikace lůžek

		Essenza 300	Essenza 300LT	Carisma sc
Vnější rozměry lůžka	[cm]	219 × 99,5*	219 × 99,5*	205 × 104
Vnitřní rozměry lůžka	[cm]	200 × 90	200 × 90	200 × 87/90
Prodloužení – flexibilní	[cm]	0; 20; 30	0; 20; 30	20
Váha lůžka	[kg]	165	180	95 (základní verze)
SWL	[kg]	300	270	225
Max. hmotnost klienta	[kg]	235–265**	205–235***	190
Výška ložné plochy – nejnižší poloha	[cm]	25,5–30,8	39,4–44,7	25
Výška ložné plochy – nejvyšší poloha	[cm]	75,9–81,2	89,8–95,1	80
Rozměr matrace	[cm]	200 × 90	200 × 90	200 × 87/90
Max. výška matrace	[cm]	20	20	18
TR/ATR	[°]	14	14	12
Výška postranic 2dílné průběžné	[cm]	×	×	budou k dispozici později
Výška postranic 3dílné průběžné	[cm]	×	×	budou k dispozici později
Výška postranic dělené	[cm]	43	43	40
Nastavení úhlu stehenního dílu	[°]	35	35	32
Nastavení úhlu zádového dílu	[°]	70	70	72
Retrakce stehenního dílu	[cm]	5	5	10
Retrakce zádového dílu	[cm]	3	3	6
Váhy		Ne	Ne	Ne
Podjezd podvozku	[cm]	12,4****	12,4****	15

Movita sc	Sentida sc	Sentida sc-xl	Sentida sc xxl	Sentida 6-xs /6-s	Sentida 7i
200/205 × 90 (bez postranic), 200/205 × 99 (s průběžnými postranicemi)	208 × 106	208 × 117	206 × 137	208 × 95	208 × 106
200 × 87/90	200 × 87	200 × 100	200 × 120	200 × 80	200 × 87
20	10; 20	10; 20	20	10; 20; 32	10; 20; 32
80 (základní verze)	115	115	160	115	145
205	270	270	300	270	250
170	235	235	265	235	215
25	23	23	23	27	27
80	80	80	80	80	80
200 × 87/90	200 × 87/90	200 × 97	200 × 120	200 × 80	200 × 87
16	20	20	18	15 až 18	15 až 18
12	17	17	15	15/15	15/15
38	×	×	není k dispozici	37,5	×
není k dispozici	×	×	není k dispozici	×	×
není k dispozici	42	42	41	až 40	až 40
32	30	30	32	32	32
72	70	70	70	70	70
10	4,8	4,8	6	6	6
6	11,5	11,5	11	11	11
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
15	15	15	15	14	14

* 221 cm pro lůžko s adaptérem příslušenství se 2 objímkami pro hrazdu na konci čela lůžka.

** Aplikační prostředí 1,2 (235 cm). Aplikační prostředí 3,5 (265 cm)

*** Aplikační prostředí 1,2 (205 cm). Aplikační prostředí 3,5 (235 cm)

**** S kolečky Tente Linea 125.

Technické parametry pasivních matrací

EffectaCare® 10

EffectaCare® 20

EffectaCare® 20 B

PrimaCare® 10

BEZPEČNOST					
Pracovní zatížení SFE	[kg]	110	150	300	200
STANDARDNÍ VNĚJŠÍ ROZMĚRY					
Délka	[cm]	190–200	190–200	200	190–200
Šířka	[cm]	86–90	86–100	100	86–90
Výška	[cm]	14	14	16	14
Váha	[kg]	7,5–8	7,5–9,5	15	10–10,5
PĚNA					
Počet vrstev		1	1	1	1
Hustota	[kg/m ³]	28	33	46	41
Odolnost proti tlaku	[kPa/m ²]	3,7	3,6	6,5	3,9
Hořlavost (CRIB 5)		Ano	Ano	Ano	Ano
Boční formovače		Ne	Ne	Ne	Ne
Vícso pěna		Ne	Ne	Ne	Ne
POTAH					
Hořlavost		CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5
Transportní držáky		Ne	Ne	Ne	Ne
ZIP					
Typ		180°	180°	180°	180°
VOLITELNÉ					
Řezané rohy		Ne	Ne	Ano	Ano
Ergoframe		Ne	Ne	Ne	Ne
Materiál pro změnu fáze (PCM)		Ne	Ne	Ne	Ne

MediMatt 30

ViskoMatt 30B

ViskoMatt 10

ViskoMatt 10B

ViskoMatt 30

ViskoMatt 50

150	285	150	235	165	190
190–200	200–208	190–200	200–205	190–200	190 - 208
79–100	86,5–100	79–100	86,5–120	79–100	86,5–114
14	20	14	16	14	16
12	22,3	12	17,1	14	17,8
2	3	2	3	2	2
50; 41; 41	85 horní vrstva, 45 střední vrstva, 46 spodní vrstva	52; 41; 41	85 horní vrstva, 41 střední vrstva, 46 spodní vrstva	41 strany, 85 horní vrstva, 33 spodní vrstva, 50 spodní vrstva, 33 spodní vrstva	41 strany, 85 horní vrstva, 33 spodní vrstva, 80 spodní vrstva, 33 spodní vrstva
3,6; 3,9; 3,9	3,9; 3,5; 3,9; 6,5	2,2; 3,9; 3,9	3,9; 3,5; 5,0; 6,5	3,9; 3; 3,6; 3,6; 3,6	3,9; 3; 3,6; 3,8; 3,6
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano
CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5	CRIB 5
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
180°	180°	180°	180°	180°	180°
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Technické specifikace stolků a sedacího nábytku

NOČNÍ STOLKY, SERVERY

Název	Základní rozměry (šířka / výška / hloubka)	Rozměr desky
Combinea A, C, E	476 × 911 × 510 mm	
Combinea B, D, F	476 × 811 × 485 mm	
Combinea s JD	500 × 877 × 510 mm	
Combinea Plus A, C, E	470 × 927 × 507 mm	
Combinea Plus B, D, F	470 × 827 × 482 mm	
Combinea Plus s JD	495 × 911 × 510 mm	
vt 3-t	660 × 779 × 470 mm	
vitalia 3	700 × 779 × 470 mm	
vivo 2-t	523 × 779 × 470 mm	
Solido 3	950 × 710–1 045 × 450 mm	450 × 950 mm
Stolek s jídelní deskou	514 × 900 × 522 mm	

SEDACÍ NÁBYTEK

Sella

Celková délka v základním stavu	910 mm
Celková délka při rozložení	1 610 mm
Celková šířka	685 / 705 mm
Maximální zdvih výškového nastavení	240 mm
Úhel nastavení zadového dílu	12°– 70°
Úhel nastavení podnožního dílu	11°– 87°
Úhel nastavení područek	-25°; 0°; 25°; 90°

Softlin Plus

SEDÁK	
Výška	460 mm
Šířka	530 mm
Hloubka	530 mm
ŽIDLE	
Šířka	620 mm
Šířka dvojžidle	111 mm
Výška (dle modelu)	84; 107; 123 mm

Softlin Comfort

Šířka	700 mm
Výška (dle polohy opěradla)	980 –1 130 mm
Hloubka (dle polohování)	720 –1 320 mm
Výška sedáku	470 mm
Průměr koleček	75 mm
5. centrální kolečko	100 mm

Gavota

Výška	1 140 mm
Šířka	700 mm
Hloubka	800 mm

Blues


Výška sedáku	500 mm
Šířka	900 mm
Výška	890 mm
Hloubka	870 mm
Délka po rozložení	2 030 mm
Sedací plocha	670 × 530 mm
Ložná plocha (po rozložení)	1 990 × 670 mm
Výška ložné plochy	410 mm

Blues Comfort

Šířka	870 mm
Hloubka	780 mm
Výška	980 mm
VNĚJŠÍ ROZMĚRY LŮŽKA	
Délka	1 950 mm
Výška	450 mm

Impuls

Dle typu modelu	
-----------------	--

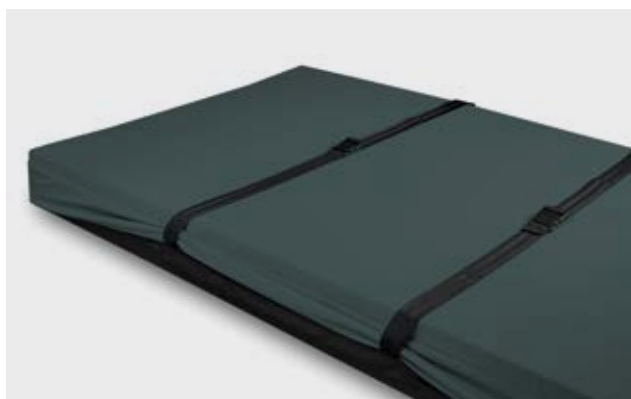

  **wissner-**
bossenhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz